

KULLANIM KILAVUZU
ARTİCAN Nemlendirici Göz Damlası
(%0,2 Sodyum Hiyalüronat)

Lütfen bu ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kullanım kılavuzu, ürünün nasıl kullanılacağına dair önemli bilgiler içermektedir. Herhangi bir sorunuz olur ise doktorunuza veya eczacınıza danışınız ya da bizimle iletişime geçiniz.

BİRİM FORMÜLÜ

%0,2 sodyum hiyalüronat

Her 1 ml'sinde 2 mg sodyum hiyalüronat ve yardımcı maddeler içermektedir. Koruyucu içermez.

ARTİCAN NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

ARTİCAN, gözlerinizi nemlendirip ıslatmakta, kayganlaştırmakta, böylece gözünüzdeki kuruma belirtilerinde rahatlama sağlamaktadır. ARTİCAN gözünüzü ferahlatır ve gözyaşı filminizi yeniler.

- ARTİCAN doğal gözyaşı filminde de bulunabilen doğal bir polimer olan sodyum hiyalüronat içermektedir.
- ARTİCAN koruyucusuzdur. Bu nedenle uzun süren uygulamalarda iyi bir şekilde tolere edilir.
- ARTİCAN uzun süre kullanım için uygundur ve kullanımı oldukça kolay ve güvenlidir.
- ARTİCAN yumuşak ve sert kontakt lenslerin ıslatılması ve nemlendirilmesi için uygundur.

ARTİCAN NE ZAMAN KULLANILIR?

Gözyaşı filminin görevi, göz kapağının her kırpma hareketinde gözün kurumaması ve göz hasarını önlemek için her kırpma hareketinde göz yüzeyine yayılmaktır. Göz yüzeyinin eksik nemlenmesine sebep olan uzun süre klimalı ve kuru ortamlarda veya televizyon izleme, bilgisayarda çalışma, sigara, çeşitli hastalıklar, ilaçlar veya terapötik işlemler gibi faktörler gözyaşı filminin bütünlüğünü bozarak göz kuruluşuna neden olmaktadır. Oysaki göz dokularının işlevselliğini koruyabilmesi için gözyaşı film tabakası tarafından nemlendirilmesi zorunludur. Bu nemlenme bozuklukları kuruluk, yanma, yabancı cisim hissi, batma veya yorgunluk belirtilerine sebep olmaktadır.

ARTİCAN, insan gözünün yapısında bulunan ve doğal bir nemlendirici olan sodyum hiyalüronat içerir. Sodyum hiyalüronat gözyaşı filminin sağlamlığını artırır, gözleri uzun süre nemlendirir.

Özellikle kontakt lens kullananlarda bu durum oldukça önemlidir. Çünkü kontakt lensin gözünüze optimum uyum sağlayabilmesi için yeterli gözyaşı sıvısında yüzebilmesi gerekir.

ARTİCAN, gözde kuruluk hissi yaşandığı zaman damlatılır. Göz yüzeyinin nemlenmesini sağlar, sert ve yumuşak lensinizi ıslatır. Göz yüzeyini korur ve rahatlatır.

ARTİCAN HANGİ SIKLIKTA KULLANILIR?


ARTİCAN, gerek duyulduca, gün içinde kuruluğa bağlı rahatsızlık hissedildiği zaman alt göz kapağının iç tarafına bir damla damlatılarak kullanılabilir.

ARTİCAN NASIL KULLANILIR?


ARTİCAN tek dozluk flakonlardan oluşmaktadır. Flakonların kullanımı aşağıda yer almaktadır. Tek dozluk flakonu damlatırken parmaklarınızı ucuna temas ettirmeyiniz. Uygulamadan önce ellerinizi yıkayınız.

Herhangi bir hasarı önlemek için, tek dozluk flakonun ucunu gözünüze veya kontakt lensinize temas ettirmeyiniz.

1. Bir adet tek dozluk flakonu yerinden ayırın.

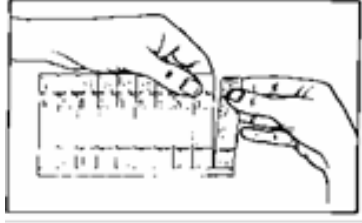

2. Tek dozluk flakonu kapağını çevirerek açınız.

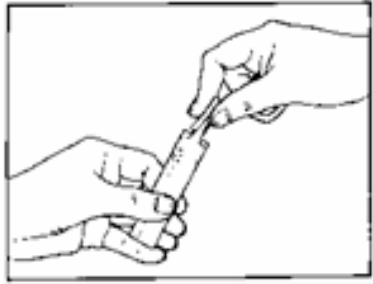

3. Başınızı hafifçe arkaya doğru eğiniz; bir elinizle alt göz kapağınızı yavaşça aşağı çekerek gözünüz ile göz kapağınız arasında bir çukur oluşturunuz. Tek dozluk flakonu uç kısmı aşağıda olacak şekilde, olabildiğince dik konumda gözünüzün üzerine getiriniz. Flakonu hafifçe sıkarak alt göz kapağınızın iç tarafına bir damla ARTİCAN damlatınız.



4. Damlanın göz yüzeyine iyi bir şekilde yayılabilmesi için önce gözlerinizi kapatınız ve daha sonra hafifçe hareket ettiriniz.



ARTİCAN KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

- ARTİCAN, koruyucu içermez, tek dozluk flakonlar kullanıldıktan sonra atılmalıdır.
- Alerjik reaksiyonlar çok nadir bildirilmiştir. Böyle bir durumda tedavi kesilmelidir.
- Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ARTİCAN'ı kullanmayınız.
- ARTİCAN'ı son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
- ARTİCAN'ı oda sıcaklığında saklayınız ve güneş ışığından koruyunuz.
- ARTİCAN'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

PİYASADA BULUNAN TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

ARTİCAN, her biri 0.5 mL'lik 30 adet tek dozluk flakon içinde kullanıma sunulmaktadır.

RAF ÖMRÜ

24 ay

SAKLAMA KOŞULLARI

15-25°C arasındaki oda sıcaklığında saklayınız.

ÜRETİCİ

VEM İLAÇ San. ve Tic. A.Ş.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi

Karaağaç Mahallesi Fatih Bulvarı No:38

Kapaklı/Tekirdağ-Türkiye

Tel: 0 (282) 758 13 80

Faks: 0 (282) 758 13 81

EN 980: 2008 Standardına Göre Hazırlanmış Sembol ve Anlamları



Onaylanmış kuruluş
numarası



Alt ve üst sıcaklık limiti



İkinci kez
kullanmayınız



Parti numarası



Dikkat



Üretim tarihi



Kullanma kılavuzuna
bakınız



Son kullanım tarihi




Paket hasarlı ise
kullanmayınız




Direk güneş ışığına maruz
bırakmayınız



Üretici bilgileri

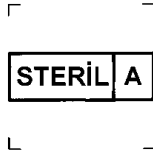

Aseptik işleme
teknikleri kullanılarak steril
edilmiştir.

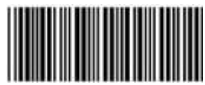

Barkod numarası



Kâğıt (Diğer Kartonlar)

Bu belge 28.05.2018 tarihinde revize edilmiştir.